


Schodołaz kroczący PT – Universal 130/160

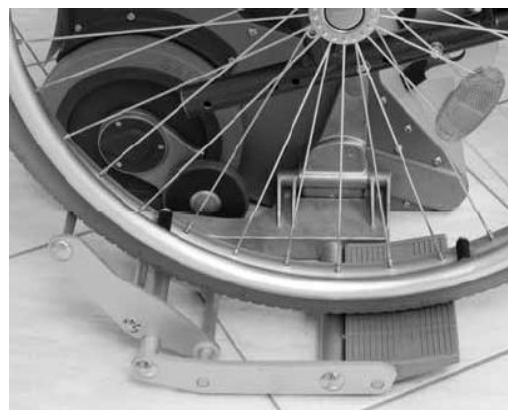

Schodołaz kroczący **PT - Universal** pozwoli ci w łatwy sposób na bezpieczne pokonywanie schodów, możesz również go używać na **schodach zabiegowych (krętych)**.

PT - Universal jest urządzeniem mobilnym, możesz je zabrać na inne schody. Daje on Ci więcej swobody, opiekunowie nie muszą już więcej nadwyręzać swojego kręgosłupa transportując Cię po schodach.

Pojazd ten umożliwia transport standardowych wózków inwalidzkich (także sportowych) po schodach bez jakichkolwiek zmian w wózkach (bez demontowania kół). **Charakterystyczne są płozy po obu stronach urządzenia** dla podtrzymania kół wózka inwalidzkiego. Łatwe w użyciu, specjalne regulowane uchwyty zapewniają stabilność oparcia. Schodołaz ten wspaniale spisuje się w **ośrodkach zdrowia jak i u prywatnych użytkowników**. Zapinanie wózka inwalidzkiego jak i jego wypięcie zajmuje mniej niż minutę.

Parametry techniczne

udźwig:	130 kg (PT – Universal 130) 160 kg (PT – Universal 160)
Prędkość:	I = 10 stopni na minutę II = 14 stopni na minutę III = 18 stopni na minutę
Zasięg:	300 - 500 stopni przy pełnym obciążeniu bez potrzeby ładowania akumulatorów
Napięcie:	24V DC; 5,2Ah
Wymiary pojazdu:	<ul style="list-style-type: none"> • Wysokość 1130 mm • Szerokość 760 mm • Długość 385 mm
Waga:	<ul style="list-style-type: none"> • Część jezdna 16,7 kg • Część kierująca 10,9 kg
Wymiary wózka:	<ul style="list-style-type: none"> • Całkowita szerokość wózka inwalidzkiego max. 730mm • Szerokość oparcia wózka inwalidzkiego max. 495mm
Wymiary schodów:	

